



OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE

**Imunoenzymatická souprava pro screeningové
stanovení protilátek proti *Mycobacterium*
paratuberculosis v hovězím séru,
plazmě a mléku**

**MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.
MVDr. Alena Králová**

5107
2020

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE

**Imunoenzymatická souprava pro screeningové stanovení
protilátek proti *Mycobacterium paratuberculosis*
v hovězím séru, plazmě a mléku**

**MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D.
MVDr. Alena Králová**

Ověřená technologie
5107/2019

**Imunoenzymatická souprava pro screeningové stanovení
protilátek proti *Mycobacterium paratuberculosis*
v hovězím séru, plazmě a mléku**

Autor:

MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.,
Hudcova 296/70, Brno

MVDr. Alena Králová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.,
Hudcova 296/70, Brno

**Ověřená technologie byla vyvinuta v rámci projektů Ministerstva
zemědělství ČR (čísla grantů QI101A094 a RO0518)**

ISBN 978-80-88233-99-2

PTB Ab ELISA 480

EAN kód: 8595635308055

Katalogové číslo: PTB480

Velikost balení: 480

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Informace o soupravě:

- Souprava umožňuje 480 vyhledávacích (screeningových, jednojamkových) vyšetření, včetně kontrol.
- Soupravu je možno použít jednorázově nebo zpracovávat postupně menší soubory vzorků.
- Purifikovaný a inaktivovaný sekreční antigen *M. avium* spp. Paratuberculosis je navázán v jamkách mikrotitračních destiček.
- Celková doba vyšetření je asi 2,5 hod.
- Způsob hodnocení: poměr absorbance vzorku k absorbanci pozitivního kontrolního limitního séra vyjádřený v procentech (%).
- Souprava je ověřena ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a Státních veterinárních ústavech.
- Souprava je schválena Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
- Souprava je vyráběna v souladu se správnou laboratorní praxí (GMP).
- Expirace soupravy je 12 měsíců od data výroby.

Využití soupravy:

- Vyhledávací vyšetření specifických protilátek IgG v hovězím séru, plazmě nebo mléku.
- Diferenciální diagnostika průjmů.
- Preventivní a kontrolní programy ozdravení skotu.

Stručný pracovní postup:

1. Ředění vzorků a kontrolních sér

- séra/plasmy/kontrolní séra: 1:12 (10 µl + 110 µl) v jamkách čisté mikrotitrační destičky

- mléko: 1 : 2 (60 µl + 60 µl)
2. Inkubace 5 – 45 minut při 21 °C.
 3. Dávkování ředěných kontrolních sér a vzorků 100 µl
 4. Inkubace 30 minut při 21°C
 5. Odsátí a promytí jamek 4 krát.
 6. Dávkování Konjugátu 100 µl.
 7. Inkubace 30 minut při 21°C.
 8. Odsátí a promytí jamek 4 krát.
 9. Dávkování jednosložkového substrátu (TMB-Complete) 100 µl
 10. Inkubace 15 minut při laboratorní teplotě.
 11. Dávkování Zastavovacího roztoku 100 µl.
 12. Fotometrické měření absorpance při vlnové délce 450 nm.
 13. Vyhodnocení výsledků.



ÚSKVBL

Ústav pro státní kontrolu
veterinárních
biopreparátů a léčiv

Vaše zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: USKVBL/12868/2019/POD

Naše č.j.: USKVBL/14583/2019/REG-Podb

Vyřizuje: Ing. Klapková

Telefon: 541 518 218

E-mail: klapkova@uskvbl.cz

Datum: 9. 12. 2019

Poznámka:

TestLine, Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68

612 00 Brno

DOPORUČENĚ S DORUČENKOU

PTB Ab ELISA 480 – rozhodnutí o schválení

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku

PTB Ab ELISA 480 (173-19/C)

včetně odsouhlaseného návodu k použití a textu na etikety.

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU ©
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
621 00 BRNO, Hudcova 56a

M. J. Bureš
MVDr. Jiří Bureš
ředitel ÚSKVBL

Počet příloh: 1

Vyhotoveno ve dvou výtiscích:

1 Výtisk: pro spis

1 Výtisk: žadatel



ÚSKVBL

Hudcova 232/56a
621 00 Brno-Medlánky
Česká republika

+420 541 518 210
Datová schránka: ra7aipu

uskvbl@uskvbl.cz
www.uskvbl.cz

31229641/0710
35-31229641/0710



ÚSKVBL

Ústav pro státní kontrolu
veterinárních
biopreparátů a léčiv

TestLine, Clinical Diagnostics s.r.o.
Křižíkova 68
612 00 Brno

V Brně, dne: 9. 12. 2019
Spis. Zn.: USKVBL/12868/2019/POD
Č.j.: USKVBL/14583/2019/REG-Podb
Vyřizuje: Ing. Klapková

ROZHODNUTÍ

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně, Hudcova 56a (dále jen „Ústav“), jako orgán příslušný k rozhodnutí podle ust. § 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), projednal žádost společnosti

TestLine, Clinical Diagnostics s.r.o., Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

.....
ze dne: 11. 10. 2019, Ústavu doručeno dne: 1. 11. 2019,
a v souladu s ust. § 65 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona

vydává tímto rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku

PTB Ab ELISA 480

.....
a dle ust. § 65 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona se tento přípravek zapisuje do Seznamu veterinárních přípravků pod číslem

173-19/C

.....
Přípravek smí být vyráběn a uváděn do oběhu jen při dodržení ukazatelů jakosti, bezpečnosti a účinnosti, jak byly schváleny v průběhu řízení o schválení. V případě jakýchkoli změn těchto ukazatelů je nutno postupovat podle platné legislativy.

Přílohami tohoto rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí je:

Příloha k rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku zapsaného do Seznamu schválených veterinárních přípravků pod číslem **173-19/C**

Text na etikety

Návod k použití

Toto rozhodnutí platí pět let ode dne nabytí právní moci.



ÚSKVBL

Hudcova 232/56a
621 00 Brno-Medlánky
Česká republika

+420 541 518 210
Datová schránka: ra7aipu

uskvbl@uskvbl.cz
www.uskvbl.cz

Klapková
19-31229641/0710
35-31229641/0710

Odůvodnění:

Ústav na základě žádosti o schválení veterinárního přípravku, předložené dokumentace a dalších náležitostí v rozsahu stanoveném veterinárním zákonem a vyhláškou č. 290/2003 Sb. v řízení posuzoval, zda jsou splněny požadavky na schválení stanovené veterinárním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Při tomto řízení Ústav postupoval podle ust. § 65 veterinárního zákona. Ústav dospěl k závěru, že tyto požadavky jsou splněny, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat podle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) u Ústavu odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. O odvolání rozhoduje Státní veterinární správa ČR.



MVDr. Jiří Bureš
ředitel ÚSKVBL

Počet výtisků: 2
1 Výtisk: pro spis
1 Výtisk: žadatel

Počet příloh: 2

Příloha k rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku zapsaného do Seznamu schválených veterinárních přípravků pod číslem 173-19/C

Název přípravku: PTB Ab ELISA 480

Držitel rozhodnutí o schválení: TEST-LINE, Clinical Diagnostics spol. s r.o., Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika.

Výrobce: TEST-LINE, Clinical Diagnostics spol. s r.o., Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika.

Popis obalu, přípravku a složení: Papírová krabička s potiskem s molitanovou vložkou, obsahující jednotlivé komponenty v PET, skleněných a PE lahvičkách a mikrotitrační destičky.

Mikrotitrační destička	5 ks
Negativní kontrola	0,4 ml
Pozitivní kontrola	0,4 ml
Konjugát	0,8 ml
Ředící roztok vzorku	240 ml
Ředící roztok konjugátu	60 ml
Promývací roztok	2 x 60 ml
TMB Complete	60 ml
Zastavovací roztok	60 ml

Velikost balení: Souprava je určena pro 480 testů.

Cílové druhy zvířat: Skot.

Charakteristika a účel užití: Imunoenzymatická souprava pro screeningové stanovení protilátek proti *Mycobacterium paratuberculosis* v hovězím séru, plazmě a mléku.

Způsob použití a dávkování: Viz návod k použití.

Bezpečnostní opatření: Viz návod k použití.

Upozornění: Viz návod k použití.

Doba použitelnosti: 12 měsíců.

Způsob uchovávání: Při teplotě 2-8°C.

Závazné sdělení držitel:

Přípravek byl posouzen jako diagnostický veterinární přípravek (VP – DG)

Jen pro profesionální použití. Prodejný bez omezení.




TestLine
Clinical
Diagnostics



Návod pro použití

PTB Ab ELISA 480

REF PTB480

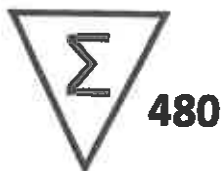

Souprava pro profesionální použití

GMP



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. &
Křížkova 68, 612 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 541 248 311
FAX: +420 541 243 390
E-mail: info@testlinecd.com
www.testlinecd.cz
www.testlinecd.com



Veterinary Research Institute
Hudcova 70, 621 32 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 533 331 111
FAX.: +420 541 211 229
E-mail: podatelna@vri.cz
www.vri.cz

09. 12. 2019

ČSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU
VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A LÉČIV
602 00 Brno, Hudcova 56a

(12)

OBSAH

1 Úvod	3
2 Princip testu	3
3 Složení soupravy	4
4 Další potřebné vybavení k provedení testu	5
5 Skladování a expirace soupravy	5
6 Příprava pracovních roztoků.....	5
7 Ředění vzorků a kontrolních sér	6
8 Pracovní postup	6
9 Pracovní schéma	8
10 Validita testu.....	9
11 Hodnocení výsledků	9
12 Bezpečnost práce	10
13 Technické připomínky	11
14 Vysvětlení symbolů	12

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
621 00 BRNO, Hudcova 56a



M. Ryh

09. 12. 2019

12

Imunoenzymatická souprava pro screeningové stanovení protilátek proti *Mycobacterium paratuberculosis* v hovězím séru, plazmě a mléku

1 Úvod

Paratuberkulóza (Johne's diseases) je ekonomicky nákladné onemocnění domácích přežvýkavců (způsobované *Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis*; MAP). Původce vyvolává neléčitelné onemocnění skotu s velmi dlouhou inkubační dobou 2 a více let. Základním klinickým příznakem je vodnatý průjem s intenzivním hubnutím při zachovaném příjmu potravy. Zvíře hyne v pokročilé fázi onemocnění na vyčerpání.

V průběhu vylučování MAP v klinickém stádiu onemocnění zvířata začnou tvořit protilátky proti původci onemocnění. Tyto protilátky však křížově reagují s jinými mykobaktériemi. Tyto křížově reagující protilátky musí být odstraněny absorpcí séra/plazmy a mléka s *M. phlei* před provedením testu.

2 Princip testu

Souprava umožňuje detekci specifických protilátek ve vzorku metodou EIA, typ sandwich (tj. pevná fáze s navázaným specifickým antigenem – protilátka z vyšetřovaného vzorku – značená protilátka). Značená protilátka (konjugát) je zvířecí imunoglobulinová frakce proti hovězímu imunoglobulinu konjugovaná křenovou peroxidázou. Peroxidázová aktivita se stanovuje pomocí substrátu s TMB, který zmodrá v případě positivity. Celá reakce je ukončena zastavovacím roztokem. Dojde ke změně modrého zabarvení na žluté. Intenzita žlutého zabarvení se měří na fotometru (při vlnové délce 450 nm) a je úměrná koncentraci specifických protilátek přítomných ve vzorku.

Použitý antigen

Purifikovaný a inaktivovaný sekreční antigen *M. avium* spp. *paratuberculosis*.

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARETŮ A LÉČIV
621 00 BRNO, Hudcova 56a

(12)

3 Složení soupravy

MICROPLATE	Potažená destička s navázaným antigenem, 12 × 8 jamek v sáčku se sušidlem	5 ks
NCS	Negativní kontrolní sérum 12krát koncentrované hovězí sérum neobsahující specifické protilátky	1 × 0,4 ml
PCS-L	Pozitivní kontrolní sérum limitní 12krát koncentrované hovězí sérum obsahující specifické protilátky	1 × 0,4 ml
CONJUGATE	Konjugát 100krát koncentrované kozí nebo králičí protilátky proti hovězímu imunoglobulinu značené peroxidázou	1 × 0,8 ml
DILUENT 14	Ředicí roztok vzorků 14 (zelený) Pufr se stabilizátory bílkovin a extraktem <i>M. phlei</i> , v pracovním ředění	1 × 60 ml
CONJ. DILUENT 16	Ředicí roztok konjugátu 16 (modrý) Pufr se stabilizátory konjugátu, v pracovním ředění	1 × 60 ml
SUBSTRATE 5	TMB-Complete 5 Jednosložkový substrátový roztok obsahující TMB/H ₂ O ₂ , v pracovním ředění	1 × 60 ml
WASH 20x	Promývací roztok 20krát koncentrovaný pufr	2 × 60 ml
STOP	Zastavovací roztok Roztok kyseliny, v pracovním ředění	1 × 60 ml
	Pracovní návod	1 ks

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
621 00 BRNO, Hudcova 56a

M. O. R. J. H.

(12)

4 Další potřebné vybavení k provedení testu

Jedno a vícekanálové pipety

Špičky pro jednorázové použití

Mikrotitrační destičky

Promývací zařízení

Stopky

Třepačka mikrotitračních destiček (při vyšetřování menších souborů vzorků není nezbytná)

Fotometr pro mikrotitrační destičky

5 Skladování a expirace soupravy

Soupravu skladujte při teplotě $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Při dodržení skladovacích podmínek platí expirace uvedená na obalu soupravy. Po otevření je doporučeno soupravu spotřebovat do 3 měsíců. Souprava nesmí zmraznout!

Vzorky a jejich skladování

Jako vzorek k vyšetření může být použito krevní sérum, plazma a vzorky mléka (individuální, směsné a bazénové). Vyšetřované vzorky (sérum, plazma, mléko) je možno uchovávat při $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ maximálně 48 hodin.

Vzorky mléka mohou být konzervovány např. Bronopolem, BSM tablety. Takto konzervované vzorky mléka je možné skladovat při $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ maximálně 6 dnů.

Při delším skladování vzorky zmrazte na $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

6 Příprava pracovních roztoků

Promývací roztok ředte 1:20. Např. 60 ml koncentrovaného Promývacího roztoku + 1140 ml destilované vody (pro 1 destičku 15 ml Promývacího roztoku + 285 ml destilované vody).

V lahvičce s Promývacím roztokem se mohou vytvořit krystaly solí. Tyto krystaly je třeba před použitím rozpustit zahřátím na vodní lázni. Roztok po naředění je stabilní jeden týden při $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ředící roztok vzorků je již v pracovní koncentraci, dále neředit!

Ředící roztok konjugátu je již v pracovní koncentraci, dále neředit!

Konjugát ředte 1:100 Ředícím roztokem konjugátu. Např. 100 μl Konjugátu doplňte Ředícím roztokem konjugátu do celkového objemu 10 ml (pro jednu destičku: 120 μl do 12 ml, pro jeden strip 10 μl do 1 ml).

Ředění provádějte nejdříve 10 minut před použitím. Dobře promíchejte!

TMB-Complete je jednosložkový chromogenní substrátový roztok v pracovním ředění, dále neředit!

Zaměnitelnost roztoků

TMB-Complete je v EIA soupravách TestLine zaměnitelný, pokud má stejné číselné označení. Promývací a Zastavovací roztok je univerzální ve všech EIA soupravách TestLine.

7 Ředění vzorků a kontrolních sér

Ředící roztok vzorků před použitím šetrně promíchejte.

Ředění vzorků a kontrolních sér

Důkladně promíchané vzorky a kontrolní séra (PKS-L a NKS) ředte 1:12 Ředícím roztokem vzorků:

např.: 10 μ l vzorku (kontrolního séra) + 110 μ l Ředícího roztoku vzorků.

Ředění provádějte v jamkách čisté mikrotitrační destičky – není součástí soupravy (viz kapitola Pracovní postup). Dobře promíchejte.

Naředěné vzorky je nutno vyšetřit co nejdříve.

Příprava vzorků mléka

Vzorky mléka se centrifugují nebo nechají sednout tak, že se tuk oddělí od mléčného séra (tuk nahoře, sérum dole). Při pipetování zaveďte špičku pod tuk, vyšetřuje se mléčné sérum.

Vzorky mléka (individuální, směsné a bazénové) se vyšetřují ředěné 1:2 Ředícím roztokem vzorků (např. 60 μ l + 60 μ l)

8 Pracovní postup

Všechny reagentie nechte vytemperovat na laboratorní teplotu a důkladně promíchejte. Nepoužijete-li celou destičku, zbylé stripy vraťte zpět do obalu se sušidlem, hermeticky uzavřete a skladujte při +2 °C až +8 °C. Důsledně chraňte před vlhkostí!

1. Dávkujte kontroly a vzorky podle pracovního schématu. Vzorky se pre-inkubují v nepotažené čisté mikrotitrační destičce.

Vzorky séra nebo plazmy

- Pipetujte 10 μ l Negativního kontrolního séra do 2 jamek (A1, B1).
- Pipetujte 10 μ l Pozitivního kontrolního séra limitního do 2 jamek (C1, D1).
- Pipetujte 10 μ l testovaných vzorků do zbývajících jamek dle pracovního schématu.
- Pipetujte do všech jamek 110 μ l Ředícího roztoku vzorku (zelený roztok).
- Obsah jamek důkladně promíchejte (nejlépe za použití třepačky mikrotitračních destiček).


- Postup může být i opačný tzn. napipetovat Ředící roztok vzorků a následně kontrolní séra a vzorky.

Vzorky mléka

- Pipetujte 10 µl Negativního kontrolního séra do 2 jamek (A1, B1).
 - Pipetujte 10 µl Pozitivního kontrolního séra limitního do 2 jamek (C1, D1).
 - Pipetujte 60 µl testovaných vzorků mléka do zbývajících jamek dle pracovního schématu.
 - Pipetujte do jamek s kontrolními séry 110 µl Ředícího roztoku vzorků (zelený roztok)
 - Pipetujte do jamek se vzorky mléka 60 µl Ředícího roztoku vzorků (zelený roztok).
 - Obsah jamek důkladně promíchejte (nejlépe za použití třepačky mikrotitračních destiček).
2. Inkubujte destičky 5 – 45 minut při 21 °C (± 5 °C).
 3. Pipetujte 100 µl naředěných vzorků a kontrolních sér na destičku potaženou antigenem.
 4. Destičku přikryjte víčkem a inkubujte 30 minut při 21 °C (± 5 °C).
 5. Odsajte obsah jamek a 4 krát promyjte pracovním promývacím roztokem. Jamky plňte po horní okraj. Na závěr důkladně vyklepejte zbytky roztoku do svého materiálu. Dbejte na to, aby byly jamky se vzorky mléka důkladně promyty (v jamce nesmí zůstat tukový kroužek).
 6. Dávkujte do všech jamek 100 µl pracovního roztoku konjugátu.
 7. Destičku přikryjte víčkem a inkubujte 30 minut při 21 °C (± 5 °C).
 8. Odsajte obsah jamek a 4 krát promyjte pracovním promývacím roztokem. Jamky plňte po horní okraj. Na závěr důkladně vyklepejte zbytky roztoku do svého materiálu.
 9. Dávkujte do všech jamek 100 µl jednosložkového substrátu TMB-Complete. Pozor na znečištění – viz kapitola Technické připomínky.
 10. Destičku přikryjte víčkem a inkubujte 15 minut při 21 °C (± 5 °C). Sledujte pozorně vývoj modrého zbarvení, zejména v jamkách s pozitivním kontrolním sérem limitním.
 11. Zastavte reakci přidáním 100 µl Zastavovacího roztoku ve stejném pořadí a intervalech jako byl dávkován substrát.
 12. Změřte na fotometru při vlnové délce 450 nm intenzitu zbarvení roztoků a to do 10 minut po zastavení reakce.

V případě celkově slabší reakce, způsobené např. nižší laboratorní teplotou, je možné prodloužit inkubaci se substrátem až na 30 minut. Zastavte reakci v okamžiku, kdy intenzita zbarvení PKS-L odpovídá 0,350 - 2,000.

9 Pracovní schéma

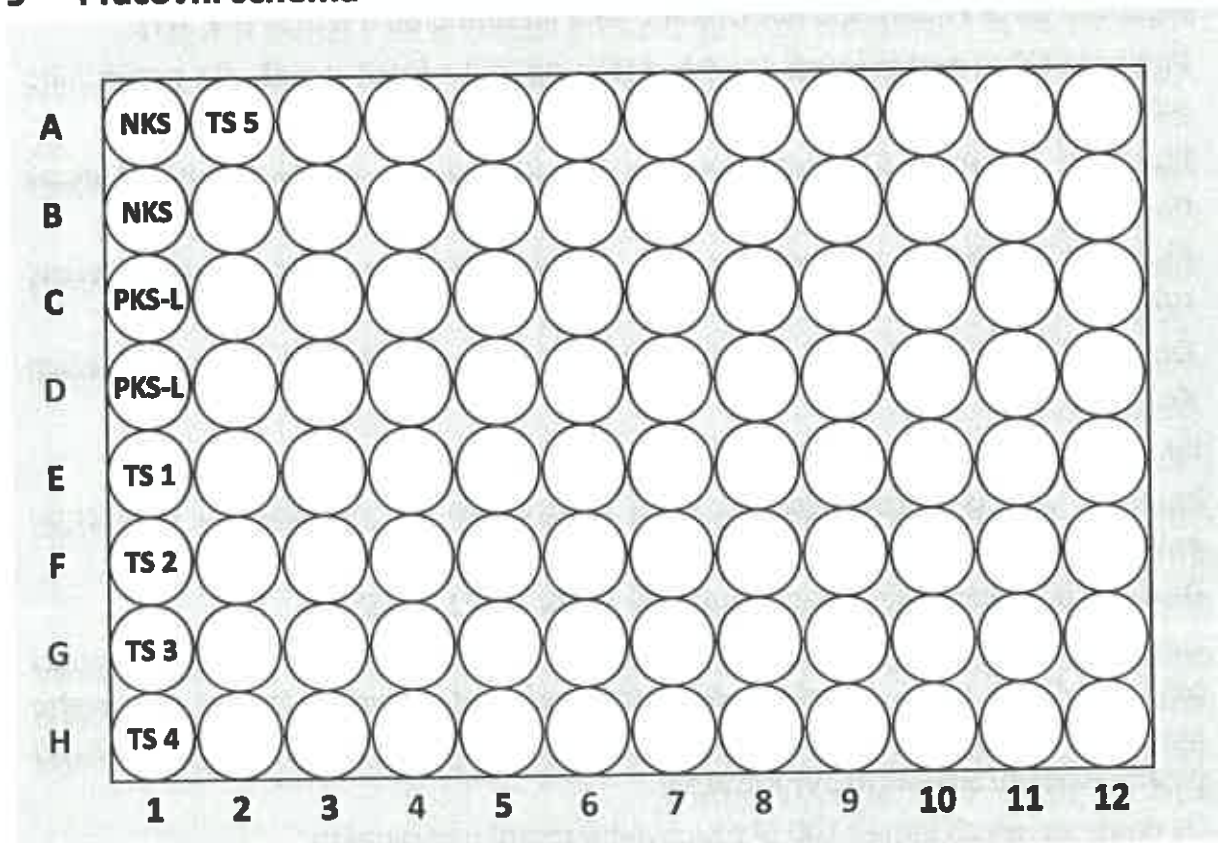

Vyšetření séra

NKS	100 µl	ředěného	NCS
PKS-L	100 µl	ředěného	PCS-L
TS 1-x	100 µl	ředěného testovaného séra	

Vyšetření mléka

NKS	100 µl	ředěného	NCS
PKS-L	100 µl	ředěného	PCS-L
TS 1-x	100 µl	testovaného vzorku mléka	

10 Validita testu

Test je platný, jestliže:

Absorbance Pozitivního kontrolního séra limitního je $> 0,350$.

$$0,350 < \boxed{\text{PCS-L}}$$

Absorbance Negativního kontrolního séra je menší než $1/3$ násobek absorbance Pozitivního kontrolního séra limitního.

$$\boxed{\text{NCS}} < 1/3 \times \boxed{\text{PCS-L}}$$

Nejsou-li tyto požadavky splněny, je výsledek testu neuspokojivý a musí být opakován.

11 Hodnocení výsledků

Výpočet poměru S/P

$$\text{S/P} = \frac{\text{Absorbance vzorku} - \text{Průměrná absorbance NKS}}{\text{Průměrná absorbance PKS-L} - \text{Průměrná absorbance NKS}} \times 100 [\%]$$

Interpretace výsledků vyšetření sér uvádí tabulka (Tabulka 1).

Tabulka 1 Interpretace výsledků vyšetření sér

Poměr S/P [%]	Hodnocení
menší než 60	negativní
60 až 70	hraniční
větší než 70	pozitivní

V případě hraničního výsledku se doporučuje vyšetření opakovat z nového odběru

Interpretace výsledků vyšetření vzorku mlék uvádějí tabulky (Tabulka 2 a Tabulka 3).

Tabulka 2 Interpretace výsledků individuálních vzorků mléka

Poměr S/P [%]	Hodnocení
menší než 30	negativní
větší nebo rovno 30	pozitivní

Tabulka 3 Interpretace výsledků směsných a bazénových vzorků mléka

Poměr S/P [%]	Hodnocení
menší než 15	negativní
větší nebo rovno 15	pozitivní

12 Bezpečnost práce

Souprava je určena pouze pro diagnostické účely in vitro.

Séra, konjugát, ředící roztok vzorků a konjugátu a veškerý materiál přicházející do styku s vyšetřovanými vzorky je nutno považovat za potenciálně infekční.

Některé reagenty obsahují toxickou složku azid sodný. Vyvarujte se kontaktu s kůží.

Zastavovací roztok obsahuje zředěný roztok kyseliny. Při práci s tímto roztokem chraňte oči a pokožku!

Je nutné dodržovat místní předpisy týkající se bezpečnosti práce.

První pomoc

Při zasažení očí vymývejte velkým množstvím vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení oděvu a kůže odložte veškeré kontaminované oblečení. Pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při potřísnění roztokem, který obsahuje sérum, pokožku dezinfikujte. Při náhodném požití vypláchněte ústa pitnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace zbytků po provedení testů

Veškeré pomůcky použité k provedení testu je nutné považovat vzhledem ke kontaktu s biologickým materiálem za potenciálně infekční. Proto je likvidujte společně s biologickým odpadem.

Likvidace soupravy po expiraci

Soupravu rozeberte na jednotlivé komponenty a zlikvidujte je jako biologický materiál. Obaly a zbytky obalů likvidujte jako tříděný odpad podle místních předpisů.

13 Technické připomínky

Pro získání spolehlivých výsledků je nutné **přesné dodržování návodu**. Při práci používejte vždy pomůcky nejvyšší čistoty. Dávejte přednost jednorázovým pomůckám.

Mikrotitrační destička – před otevřením nechejte vždy sáček s mikrotitrační destičkou vytemperovat na laboratorní teplotu, aby nedošlo ke kondenzaci vodních par na povrchu destičky.

Promývací roztok – pro přípravu promývacího roztoku v pracovním ředění používejte vysoce kvalitní destilovanou vodu.

Promývání – dodržujte předepsaný počet promývacích cyklů a jamky plňte vždy až po horní okraj.

TMB-Complete – pipetovací vaničku pro TMB-Complete nepoužívejte pro jiné roztoky. Zbytek roztoku z pipetovací vaničky nevracejte zpět do lahvičky.


Nereprodukovatelné výsledky mohou pocházet z metodických chyb, zejména:

- nedostatečné promíchání roztoků a vzorků před použitím
- záměna uzávěrů lahviček
- použití stejné špičky při pipetování různých roztoků
- vystavení reagensů nadměrné teplotě, bakteriální nebo chemické kontaminaci
- nedostatečné promytí jamek, neplnění jamek až po okraj, špatné odsátí zbytků roztoku
- znečištění okrajů jamek konjugátem nebo vzorky
- záměna reagensů z různých šarží souprav
- kontakt reagensů s oxidanty, těžkými kovy a jejich solemi.

Soupravu je možno zpracovávat postupně. Pro přípravu pracovních roztoků odeberte jen takové množství reagensů, které bude spotřebováno pro analýzu.

Soupravu je možno zpracovat na všech typech automatických ELISA analyzátorů. V případě potřeby TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. nabízí certifikovanou modifikaci pracovního návodu pro konkrétní typ analyzátoru.

Při nedodržení pracovního postupu výrobce neodpovídá za správnou funkci soupravy.

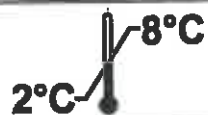14 Vysvětlení symbolů

Skladovací teplota



Udržovat v suchu



Použít do data



Číslo šarže



Výrobce



Čtěte návod k použití



Katalogové číslo



Počet testů



Správná výrobní praxe

Poznámky

Poznámky

29.08.2019

14/16

USTAV PRO STÁTNÍ MONITORING
VETERINÁRNÍCH LÉČIV, REPARÁTŮ A LÉČIV
621 00, Hudecova 56a

verze 1

12

09. 12. 2019

Poznámky

Schéma testu PTB Ab ELISA 480

Krok	Symbol	Jednotlivé kroky testu
1		Ředění vzorků a kontrolních sér Séra/plazmy/kontrolní séra: 1:12 (10 µl + 110 µl) Mléko: 1:2 (60 µl + 60 µl)
2		Inkubace 5 - 45 min při 21 °C
3		Dávkování ředěných kontrolních sér a vzorků 100 µl
4		Inkubace 30 min při 21 °C
5		Odsátí a promytí jamek 4 krát
6		Dávkování Konjugátu 100 µl
7		Inkubace 30 min při 21 °C
8		Odsátí a promytí jamek 4 krát
9		Dávkování substrátu (TMB-Complete) 100 µl
10		Inkubace 15 min při laboratorní teplotě
11		Dávkování Zastavovacího roztoku 100 µl
12		Fotometrické měření při 450 nm



Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 5 3333 1111; www.vri.cz; e-mail: vri@vri.cz